

取引先各位

株式会社カネカメディックス

膜型血漿分離器「サルフラックス FP」及び専用血液回路の血漿ポート形状変更のお知らせ
(第二報)

<販売開始時期のご案内>

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今年3月よりご案内しております、膜型血漿分離器「サルフラックス FP」(製造販売元：旭化成メディカル株式会社)の血漿ポート形状変更及び、それに伴うリポソーバー用の専用血液回路NK-M3R(L)(製造販売元：日機装株式会社)について、販売開始時期をお知らせいたします(変更内容の詳細につきましては、別紙をご参照下さい)。新血漿ポート品の「サルフラックス FP」の販売開始は2019年12月下旬、新血漿ポート対応血液回路NK-M3R(D)の販売開始は2020年6月を予定しております。

なお、既存品から新血漿ポート品へのスムーズな転換を進める目的で、既存/新血漿ポート両方の「サルフラックス FP」との接続が可能な『中間コネクタ付血液回路NK-M3R(AD)』を先行して発売しております。この『中間コネクタ付血液回路』は、「サルフラックス FP」の流通在庫が新血漿ポート品に切り替わるまでの一時的な販売となります(ご注意：中間コネクタのみの販売は致しかねますのでご了承下さい)。

お取引先の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

■サルフラックス FP

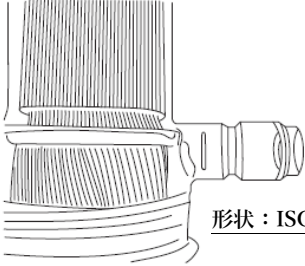

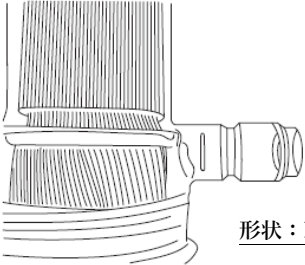
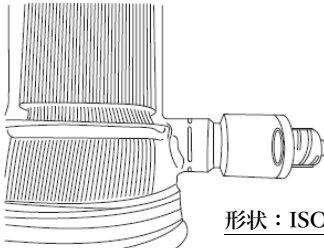


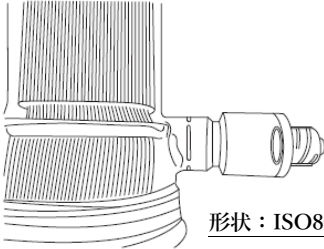

	既存品	新血漿ポート品
カタログ番号	FP-02/FP-05/FP-08	FP-02D/FP-05D/FP-08D
JAN コード	FP-02 : 4537693900578 FP-05 : 4537693900585 FP-08 : 4537693900592	FP-02D : 4537693900936 FP-05D : 4537693900943 FP-08D : 4537693900950
製品箱と輸送箱の識別表示	赤字の表示なし	新血漿ポート
販売時期	新型販売開始以降、在庫がなくなり次第終了	2019年12月下旬～(予定)

■専用血液回路

	既存品	中間コネクタ付品	新血漿ポート品
カタログ番号	NK-M3R(L)	NK-M3R(AD)	NK-M3R(D)
JAN コード	4987671100115	4987671100153	4987671100207
製品箱と輸送箱の識別表示	赤字の表示なし	血漿ポート用中間コネクタ付属 血漿分離器の接続部形状を ご確認の上、ご使用ください	新血漿ポート対応
販売時期	終了	新型販売開始以降、在庫がなくなり次第終了	2020年6月～(予定)

上記変更内容につきましてご不明な点に関しましては、弊社営業担当までお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。

以上

使用する血液回路	膜型血漿分離器 「サルフラックス FP」	専用血液回路
既存品	<p>既存品</p>  <p>形状：ISO8637</p>	<p>既存品：NK-M3R(L)</p>  <p>血漿ポート接続部分</p>
中間コネクタ付品	<p>既存品</p>  <p>形状：ISO8637</p> <p>新血漿ポート品</p>  <p>形状：ISO80369-7</p>	<p>中間コネクタ付血液回路: NK-M3R(AD)</p> <p><u>膜型血漿分離器が既存品の場合は中間コネクタをご使用下さい。</u></p>  <p>中間コネクタ (同梱)</p> <p><u>膜型血漿分離器が新血漿ポート品の場合は中間コネクタを用いずに新血漿ポート対応血漿圧ラインをご接続下さい。</u></p>  <p>血漿ポート接続部分</p> <div style="border: 2px solid green; padding: 5px;"> <p>中間コネクタ付品には中間コネクタ 1 本と血漿圧ライン (新旧用各 1 本ずつ) 2 本が同梱されています。 血漿ポート部の形状に合致した血漿圧ラインをご使用下さい。</p> </div>
新血漿ポート品	<p>新血漿ポート品</p>  <p>形状：ISO80369-7</p>	<p>新血漿ポート対応血液回路: NK-M3R(D)</p>  <p>血漿ポート接続部分</p>