

2020年8月吉日

お客様 各位

株式会社カネカメディックス

シラスコン® 回路用ラックⅡをご使用中のお客様へ
シラスコン® 回路用ラックⅢのご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

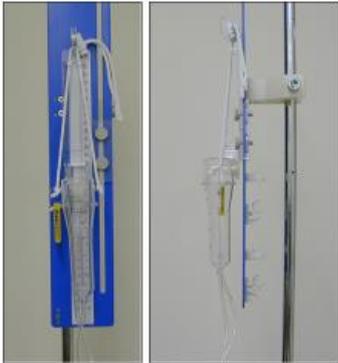
平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「シラスコン® 回路用ラックⅡ」の後継品である「シラスコン® 回路用ラックⅢ」を改めてご案内申し上げます。

改良点につきましては、下記をご確認頂き、是非とも、お買い換えのご検討を賜ります様、宜しく願い申し上げます。

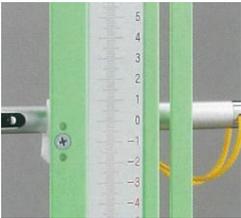
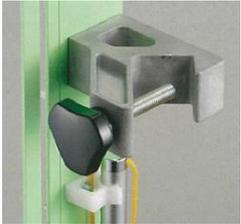
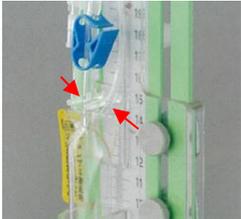
敬具

【回路用ラックⅡと回路用ラックⅢ】

回路用ラックⅡ (カタログ番号：774-1N)	回路用ラックⅢ (カタログ番号：774-3N)
	

【改良点】

- ・ マイナス圧、プラス圧設定時のメジャーを一本化しました。 (下表①参照)
- ・ ポールへの取付け部品を金属製に変更しました。 (下表②参照)
- ・ 脳室ドレナージ回路安定化用突起を設けました。 (下表③参照)
- ・ 定量計用装着安定化ビスを設けました。 (下表④参照)

	改良点		目的
①	マイナス圧、プラス圧設定時のメジャーを一本化した。		0 点位置の設定間違い防止のため。
②	ポールへの取付け部品を金属製に変更した。		耐久性と安全性を向上させるため。
③	脳室ドレナージ回路安定化用突起を設けた (赤矢印)。	【脳室ドレナージ回路】 	脳室ドレナージ回路の装着安定性を向上させるため。
④	定量計用装着安定化ビスを設けた (赤矢印)。	【脳室ドレナージ回路 (定量計付)】 	脳室ドレナージ回路 (定量計付) の前後動を軽減するため。

シラスコン®回路用ラックⅢ

カタログ番号	概要	希望小売価格	包装単位
774-3N	シラスコン®脳室ドレナージ回路専用	¥35,000/セット	1セット/箱

医療機器に該当しません

シラスコン®バッグ用ハンガー

カタログ番号	概要	希望小売価格	包装単位
773N	シラスコン®排液バッグ専用	¥600/個	5個/箱

医療機器に該当しません

以上