

APROアスピレーションカテーテル

APRO<sup>®</sup>

中心循環系塞栓除去用カテーテル

医療従事者向け

# APRO<sup>®</sup>

## Aspiration Catheter



カタログ番号	JANコード	内径 (ID)	外径 (OD)	コーティング長	有効長
APRO-70-132	0850014025106	0.070inch/1.8mm	0.083inch/2.1mm	97cm	132cm

### ■ 血管壁にやさしい先端部

先端ラウンド加工

### ■ 耐キンク性能を備えた金属補強

Coil×Braid/Hybrid Woven Technology

### ■ 遠位血管へスムーズなアクセスを目指したシャフト構造

Hydrophilic coating 97cm/

部位によって多段階に硬度を変化させたシャフト設計


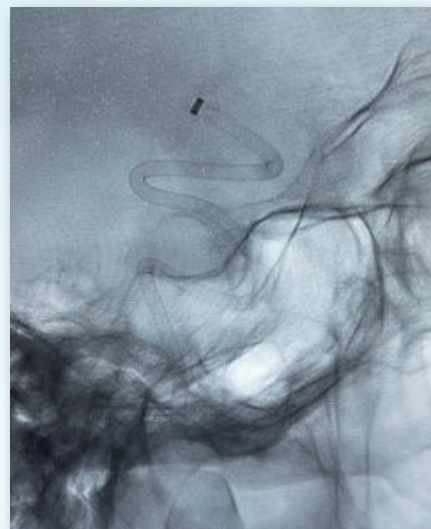


Image courtesy of  
Dr.Christopher A.Neal

カタログ番号	JANコード	内容物
S-KIT	4540778187160	三方活栓×1、Tコネクター×1、 バックロックシリンジ×2

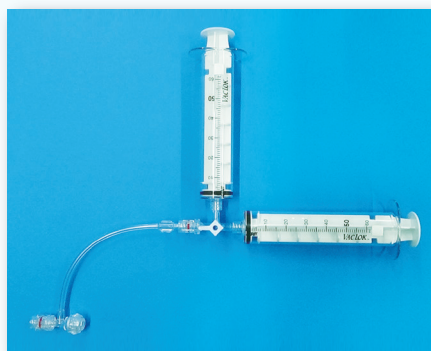

※内容物はそれぞれ個包装仕様です。

クラス分類：IV (高度管理医療機器)  
 一般的名称：中心循環系血栓除去用カテーテル  
 販売名：APROアスピレーションカテーテル  
 医療機器承認番号：30600BZX00046000  
 保険医療材料請求区分：血栓除去カテ・脳直接吸引  
 製造元 Alembic, LLC (アメリカ)  
 【APROは、Palmera Medical, Inc.の商標です。】

**使用上の注意:必ず電子添文をご覧の上、ご使用ください。**

【製造販売元】

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18  
 TEL.06-6226-5256

【販売元】

株式会社 **カネカメディックス**

<https://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32 (アーク森ビル) TEL.050-3181-4100  
 大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18 (中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060