

カネカマイクロカテーテル C/P-N1

*MiZuki*

中心循環系マイクロカテーテル

*MiZuki*




Micro Catheter



KANEKA  
MEDICAL  
PRODUCTS



# Trackability・Crossabilityの更なる高みへ 多様化するニーズに応えるガイドワイヤーサポートカテーテル

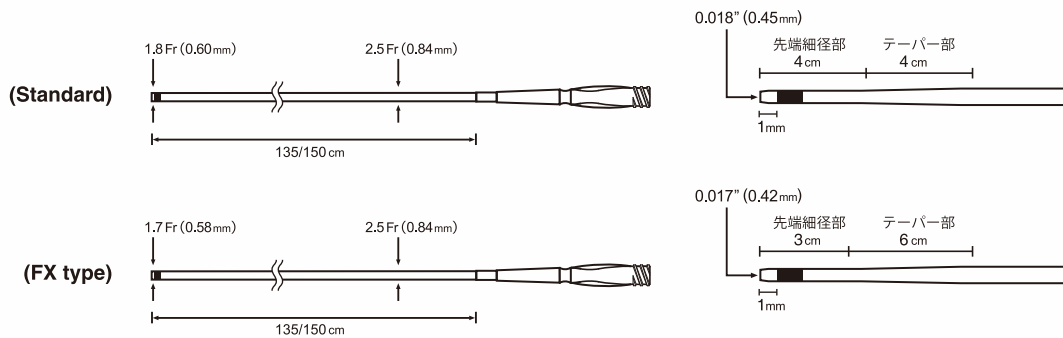

## 1 親水性コーティング

新規開発の独自のコーティングによる

卓越したTrackability・Crossability※1が手技を成功に導きます

※1 自社試験データに基づく当社従来製品との比較

## 2 特長が異なる2タイプ

シャフト先端部硬度が異なる2つのタイプをラインナップすることにより

幅広い症例・シチュエーションに対応します

(FX type:Flexible type)

## 3 シャフト構造

耐キンク性に優れるSUSブレードを補強層に、滑りに優れるフッ素樹脂を内層に採用し  
かつ硬度段差を低減することにより

優れたワイヤー操作性・Trackability・Crossability※2を発揮します

※2 自社試験データに基づく当社従来製品との比較

## Ordering Information

製品名	カタログ番号	JANコード	有効長 (cm)	外径 (Fr/mm)			内径 (inch/mm)	
				Tip	Distal	Proximal	Distal	Proximal
Mizuki (Standard)	MZ14-135BM	4540778141162	135	1.8/0.60	1.8/0.60	2.5/0.84	0.018/0.45	0.022/0.55
	MZ14-150BM	4540778141179	150					
Mizuki (FX type)	MZ14-135TM	4540778141186	135	1.7/0.58	1.7/0.58	2.5/0.84	0.017/0.42	0.022/0.55
	MZ14-150TM	4540778141193	150					

保険医療材料請求区分：マイクロカテ-OSB

高度管理医療機器

一般的名称：中心循環系マイクロカテーテル  
販売名：カネカマイクロカテーテルC/P-N1  
医療機器承認番号：22500BZX00303000  
包装：1本/箱

使用上の注意:必ず添付文書をご覧ください。

※「MIZUKI」は(株)カネカの登録商標です。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18

TEL.06-6226-5256

販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

TEL.050-3181-4060

Ref No.107-148b Date May 2017 1000 OS