

Balloon Compliance

推奨拡張圧 (Nominal Pressure)

最大拡張圧 (Rated Burst Pressure)

バルーン径 (mm)	圧力 $\frac{\text{atm}}{\text{kPa}}$														
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	203	405	608	811	1013	1216	1419	1621	1824	2027	2229	2432	2634	2837	3040
4.0	3.47	3.52	3.58	3.67	3.76	3.86	3.94	4.00	4.06	4.12	4.17	4.23	4.28	4.34	4.41
5.0	4.33	4.41	4.51	4.64	4.75	4.85	4.93	5.00	5.06	5.12	5.18	5.25	5.31	5.38	5.45
6.0	5.13	5.25	5.40	5.58	5.72	5.84	5.93	6.00	6.07	6.14	6.21	6.29	6.36	6.45	6.55
7.0	5.89	6.06	6.29	6.52	6.70	6.82	6.92	7.00	7.08	7.16	7.24	7.33	7.43		
8.0	6.61	6.86	7.16	7.43	7.63	7.78	7.90	8.00	8.09	8.19	8.30	8.43			


(注) 最大拡張圧を超えて使用しないでください ※斜字体は参考値を示す

Product Specifications

最大ガイドワイヤー径: 0.035"

カタログ番号	JANコード	カテーテル有効長 (mm)	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	シャフト径 (Fr/mm)	適合シース (Fr)
CH2-45-4020	4540778175815	450	4.0	20	5.0/1.65	5
CH2-45-5020	4540778175822		5.0			5
CH2-45-6020	4540778175839		6.0			5
CH2-45-7020	4540778175846		7.0			6
CH2-45-8020	4540778175853		8.0			6
CH2-45-4040	4540778175860		4.0	40		5
CH2-45-5040	4540778175877		5.0			5
CH2-45-6040	4540778175884		6.0			5
CH2-45-7040	4540778175891		7.0			6
CH2-45-8040	4540778175907		8.0			6
CH2-45-4060	4540778175914		4.0	60		5
CH2-45-5060	4540778175921		5.0			5
CH2-45-6060	4540778175938		6.0			6
CH2-45-7060	4540778175945		7.0			6
CH2-45-8060	4540778175952		8.0			6
CH2-45-40100	4540778175969		4.0	100		5
CH2-45-50100	4540778175976		5.0			5
CH2-45-60100	4540778175983		6.0			6
CH2-45-70100	4540778175990		7.0			6
CH2-75-4040	4540778178403		750			4.0
CH2-75-5040	4540778178410	5.0		5		
CH2-75-6040	4540778178427	6.0		5		
CH2-75-7040	4540778178434	7.0		6		
CH2-75-8040	4540778178441	8.0		6		
CH2-75-4060	4540778178458	4.0		60	5	
CH2-75-5060	4540778178465	5.0			5	
CH2-75-6060	4540778178472	6.0			6	
CH2-75-7060	4540778178489	7.0			6	
CH2-75-8060	4540778178496	8.0			6	
CH2-75-40100	4540778178502	4.0		100	5	
CH2-75-50100	4540778178519	5.0			5	
CH2-75-60100	4540778178526	6.0			6	
CH2-75-70100	4540778178533	7.0			6	

高度管理医療機器 (クラスIV)  
 一般的名称: バルーン拡張式血管形成術用カテーテル  
 販売名: カネカPTAカテーテルPE-W8  
 医療機器承認番号: 30200BZX00124000  
 保険医療材料請求区分: PTAカテ・一般・標準

 使用上の注意: 必ず添付文書をご覧の上、ご使用ください。

※「OHICHO NEO」は (株) カネカの出願中の商標です。

【製造販売元】  
**株式会社 カネカ**  
 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18  
 TEL.06-6226-5256

【販売元】  
**株式会社 カネカメディックス**  
<http://www.kaneka-med.jp/>  
 東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32 (アーク森ビル) TEL.050-3181-4100  
 大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18 (中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060

OHICHONEO  
 High Pressure PTA Balloon Catheter



## Trackability

10mm 長のチップを採用することで  
吻合部のような急峻なカーブでも  
血管壁にストレスを与えることなく通過が可能

## High Pressure Resistance

2層構造バルーンの採用により最大拡張圧 (RBP) 26atm<sup>\*</sup>を実現  
強固な病変に対しても安定した拡張力を発揮 <sup>\*</sup>バルーン径 6mm まで


# OHICHONEO

High Pressure PTA Balloon Catheter


柔と剛を兼ね備えた次世代型 Fusion Balloon

## Size lineup

バルーン長 60mm・100mm モデル  
バルーン径 8mm モデルによる  
手技バリエーションの拡大

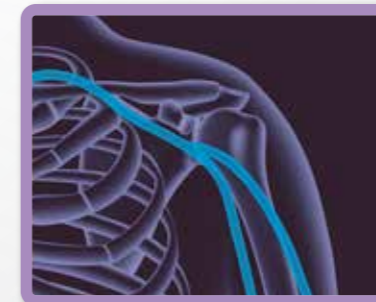

中心静脈などの  
血管径が太い病変に適用可能

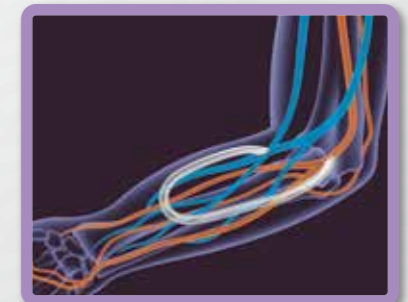

Tandem lesion や Graft などの  
長い病変に適用可能