

i-ED コイル

i-ED COIL

中心循環系血管内塞栓促進用補綴材

医療従事者向け

i-ED COIL
Detachable Coil




KANEKA
MEDICAL
PRODUCTS

Waving SR Technology


*SR: Stretch Resistant(伸長防止線)

従来のEDコイルシリーズで実績のある
Waving SRをPP(ポリプロピレン)で継承。
ストレートニングを軽減して
最後まで折りたたむ。

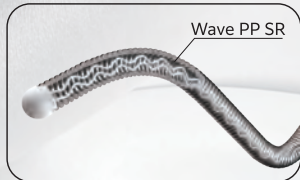

Gold Pusher

従来のEDコイルシリーズと比較して
滑りにくく、押しやすく、
そして見やすい

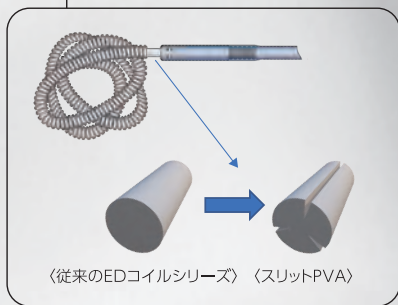

Speed Up

スリットPVAにより膨潤時間の短縮


プレパレーションからコイル離脱までスムーズに

*i-ED COILはPVAロッドを溶解してコイルを離脱するシステムです。
離脱を確実にするためには、PVAが膨潤している必要があります。

Electro Detach System

ELECTRO DETACH GENERATOR v4

音とランプで
デタッチ操作を
ナビゲート

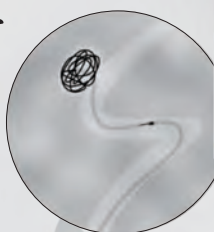

※i-ED COILの造影マーカーの後端が、
マイクロカテーテルの第2マーカーに重なった位置がデタッチポイントです。

 **Complex**
0.010inch *SilkySoft*



カタログ番号	JANコード	一次コイル径	二次径	コイル長	タイプ
		inch	mm	cm	
390-0101	4540778176423	0.010	1	1	<i>SilkySoft (SS)</i>
390-0102	4540778176430			2	
390-0103	4540778176447			3	
390-01H2	4540778176461		1.5	2	
390-01H3	4540778176478			3	
390-01H4	4540778176485			4	
390-0202	4540778176492		2	2	
390-0203	4540778176508			3	
390-0204	4540778176515			4	
390-0208	4540778176539			8	
390-02H4	4540778176546		2.5	4	
390-0304	4540778176577		3	4	
390-0306	4540778176584	6			

 **Complex Infini**
0.012inch *SilkySoft*



カタログ番号	JANコード	一次コイル径	二次径	参考使用径	コイル長	タイプ
		inch	mm		cm	
393-020304	4540778177253	0.012	3	2-3	4	<i>SilkySoft (SS)</i>
393-020306	4540778177260				6	
393-020310	4540778177284				10	
393-030515	4540778177314		5	3-5	15	
393-030520	4540778177321				20	

 **Infini**
0.014inch *ExtraSoft・Soft*



カタログ番号	JANコード	一次コイル径	二次径	参考使用径	コイル長	タイプ
		inch	mm		cm	
373-040815	4540778177635	0.014	14	4-8	15	<i>ExtraSoft (ES)</i>
373-040830	4540778177659				30	
373-051250	4540778177734		20	5-12	50	<i>Soft (S)</i>

販売名	カタログ番号	JANコード	医療機器承認番号	クラス分類
エレクトロデタッチジェネレーター v4	347-404	4540778138797	22400BZX00213000	IV
セムジェルパッド	305-2S	4562147792966	21600BZZ00412A02	II

クラス分類：IV(高度管理医療機器)
販売名：i-EDコイル
医療機器承認番号：30100BZX00069000
保険医療材料請求区分：塞栓用コイル・コイル・電気式デタッチャブル型

 **使用上の注意:必ず電子添文をご覧の上、ご使用ください。**

※「i-ED COIL」「i-ED COIL」及び「ELECTRO DETACH GENERATOR」は、(株)カネカの商標又は登録商標です。

【製造販売元】

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18
TEL.06-6226-5256

【販売元】

株式会社 **カネカメディックス**

<https://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32 (アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18 (中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060