

カネカ高周波止血鉗子
RAICHO 2

単回使用高周波処置用内視鏡能動器具

医療従事者向け

RAICHO 2

把持力と回転性能で手技をサポート



NEWモデル
スモールカップ・ワイドエッジ
新登場!



従来カップ



スモールカップ



ワイドエッジ


RAICHO 2

細径化により内視鏡の吸引力向上

挿入部最大径を2.35mmまで細径化することで治療時の血液等の吸引力が向上し、視野確保をサポートします。

※自社製品「カネカ高周波ナイフ ISSEN」比較



※ISSENの挿入部最大径：2.75mm

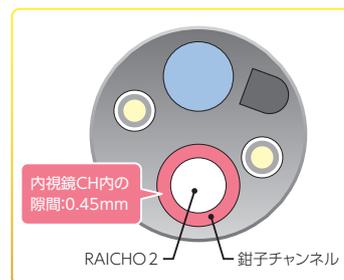

スコープ先端イメージ図

出血点を的確にとらえる回転性能

ハンドルとカップ部の回転がほぼ1対1で連動しているため、さまざまな角度の出血点や血管に対してカップをアプローチしやすくなります。

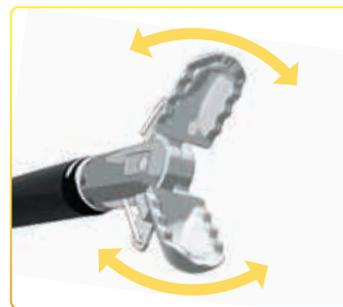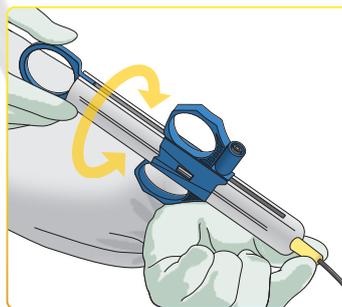

対象臓器に適した先端形状を選択可能

6mm

従来カップ
開き幅6mmのワニ口中空カップ採用により、出血点が不明な場合などに広範囲を把持しやすくなります。

NEWモデル


4mm

スモールカップ
開き幅4mmの溝付扁平カップ採用により、大腸など細かな止血操作が必要な部位に向いています。

6mm

ワイドエッジ
開き幅6mmの肉厚カップ採用により、組織内部まで凝固しやすくなります。

※当社従来カップ比較

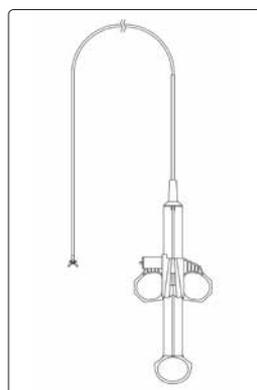

製品仕様

			NEW	NEW	NEW
モデル名	RC1550-2	RC1900-2	RC2200-2SC	RC1550-2WE	RC1900-2WE
有効長	1550mm	1900mm	2200mm	1550mm	1900mm
挿入部最大径	2.35mm	2.35mm	2.35mm	2.35mm	2.35mm
適応鉗子口径	2.8mm以上	2.8mm以上	2.8mm以上	2.8mm以上	2.8mm以上
カップ開幅	6mm	6mm	4mm	6mm	6mm
包装単位	1本	1本	1本	1本	1本
JANコード	4540778178120	4540778178670	4540778183292	4540778183285	4540778183315

一般的名称：単回使用高周波処置用内視鏡能動器具

販売名：カネカ高周波止血鉗子

認証番号：228ABBZX00031000



使用上の注意：必ず電子添文をご覧の上、ご使用ください。

※製品の仕様については、予告なしに変更することがあります。

※「RAICHO」および「ISSEN」は株式会社カネカの登録商標です。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18

TEL.06-6226-5256

販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<https://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

TEL.050-3181-4060