

カネカ高周波ナイフ ISSEN

ISSEN

単回使用高周波処置用内視鏡能動器具

カネカ高周波ナイフ ISSEN

ISSEN

Electrosurgical Knife

この一閃がESDを次のステージへ

特長

1 送水機能つき

- ▶ ナイフ部に付着した異物を除去


2 ナイフ部収納時に0.5mmの突出長を確保

- ▶ 安定した凝固操作をサポート

3 挿入部先端をT字型に加工

- ▶ 粘膜への過剰な潜り込みを防止
- ▶ 粘膜のトラクションをサポート

形状・構造

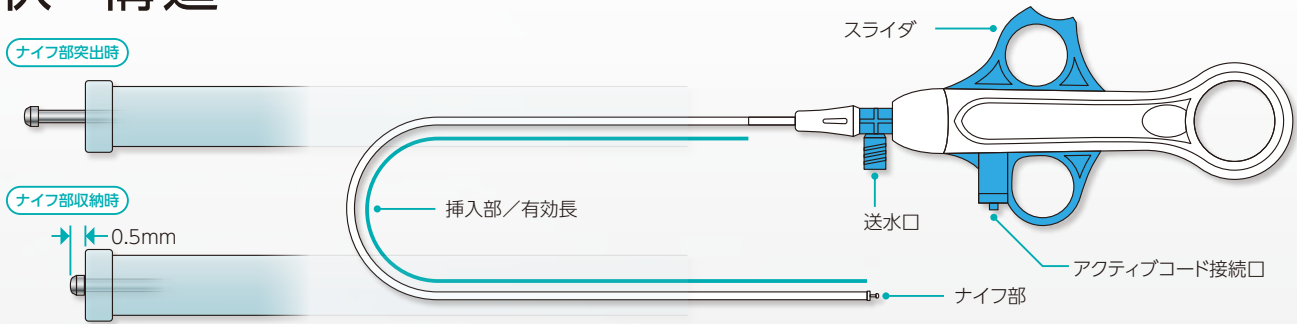

製品仕様

カタログ番号	JANコード	有効長	ナイフ長	挿入部最大径	適合鉗子口径	包装
SN1650-15	4540778173774	1,650mm	1.5mm	2.75mm	3.2mm以上	1本/箱
SN1650-20	4540778173781		2.0mm			
SN2000-15	4540778173798	2,000mm	1.5mm			
SN2000-20	4540778173804		2.0mm			

管理医療機器 (クラスII)

一般的名称: 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具

販売名: カネカ高周波ナイフ ISSEN

医療機器認証番号: 302ABBZX00024000



使用上の注意: 必ず添付文書をご覧の上、ご使用ください。

※「ISSEN」は株式会社カネカの登録商標です。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18

TEL.06-6226-5256

販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060