

外科ドレーン

医療従事者向け




SILASCON[®]
シラスコン[®]

外科ドレーン製品

シラスコン® デュープルドレーンSP


チューブドレーンの基本機能(排液性、耐キンク性、応用性)を兼ね備えた
スタンダードなドレーンチューブ

- 多孔管構造により、毛細管現象を利用した排液が行えます。
- ルートを確保しやすくするため、適度な硬さの設計にしました。
- X線不透過ラインにより、ドレーン位置の視認が可能です。

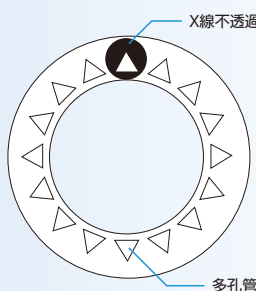

デュープルドレーンSP
520-6SP / 520-8SP /
520-10SP

デュープルドレーンSP
(接続タイプ)
525-6SP / 525-8SP /
525-10SP

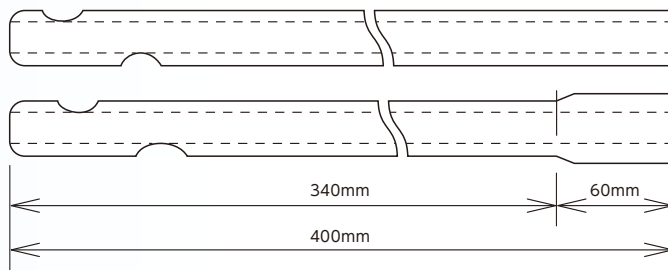


製造販売元
信越ポリマー株式会社
TEL.03-5288-8412


シラスコン® デュープルドレーンSP (ソフトタイプ)

チューブドレーンの基本機能を維持した
よりソフトなドレーンチューブ

- ドレーンをデュープルドレーンSPよりもさらに柔らかくし、組織に対する刺激が少ない設計にしました。
- 多孔管構造により、毛細管現象を利用した排液が行えます。
- 内腔に突起があり、耐キンク性を持つ構造です。
- X線不透過ラインにより、ドレーン位置の視認が可能です。

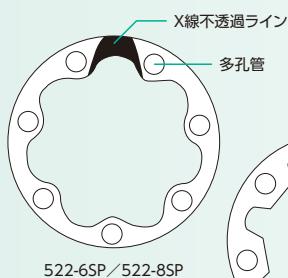


522-6SP / 522-8SP

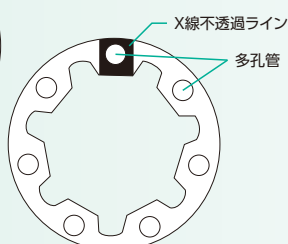

522-10SP

デュープルドレーンSP (ソフトタイプ)
522-6SP / 522-8SP / 522-10SP

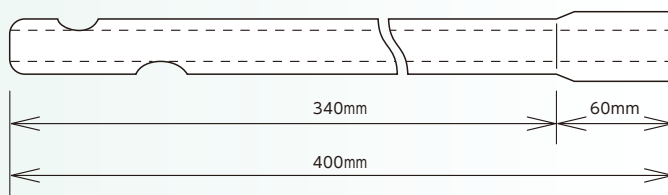


製造販売元
信越ポリマー株式会社
TEL.03-5288-8412


シラスコン® ペンローズドレーンSP

毛細管現象により排液するフィルム型ドレーン

- X線不透過ラインにより、ドレーン位置の視認が可能です。
- ドレーンの内腔に不規則な波型の溝を設けてあるため
圧迫や折れ曲がり時にも排液路を確保する耐キンク性能があります。

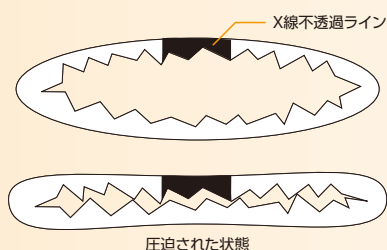

ペンローズドレーンSP
501-4SP / 501-6SP / 501-8SP /
501-10SP / 501-12SP

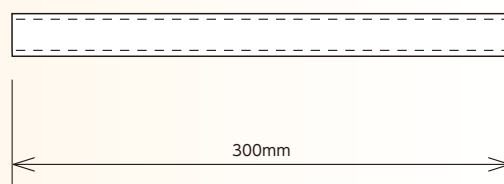


製造販売元
信越ポリマー株式会社
TEL.03-5288-8412


シラスコン® 閉鎖式外科ドレーンセット

感染を低減する閉鎖式ドレーンシステム


- 感染を低減する閉鎖式外科ドレーンとして使用できます。
- ドレーンと専用の閉鎖式排液バッグがセット包装なので、すぐに使用できます。
- バッグのコネクターおよび接続チューブの内径を詰まりにくい設計にしました。
- ドレーンの適応部位により、デュブルドレーンとデュブルソフトの
2種類から選択できます。

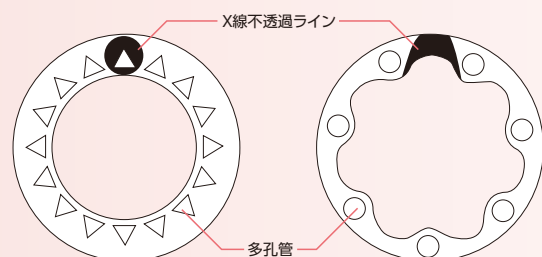

デュブルドレーンタイプ
526-6FSP / 526-8FSP / 526-10FSP

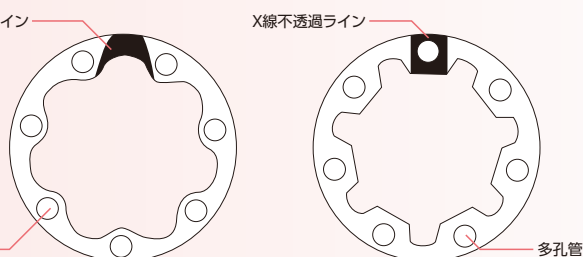

デュブルソフトタイプ
527-6FSP / 527-8FSP

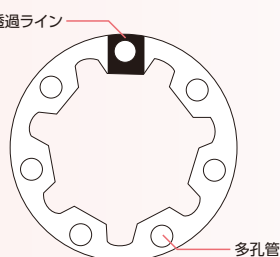

デュブルソフトタイプ
527-10FSP

製造販売元
フォルテグロウメディカル株式会社
TEL.0283-22-2801

製品名	カタログ番号	JANコード	サイズ(mm)				包装単位
			内径	外径	接続管 最小内径	全長	
シラスコン®デュープルドレーンSP	520-6SP	4974007801068	3.2	6.0	－	400	10本／箱
	520-8SP	4974007801082	5.2	8.0	－	400	
	520-10SP	4974007801105	6.6	10.0	－	400	
シラスコン®デュープルドレーンSP (接続タイプ)	525-6SP	4974007801112	3.2	6.0	8.0	400	
	525-8SP	4974007801129	5.2	8.0	8.0	400	
	525-10SP	4974007801136	6.6	10.0	8.0	400	
シラスコン®デュープルドレーンSP (ソフトタイプ)	522-6SP	4974007801143	－	6.0	8.0	400	10本／箱
	522-8SP	4974007801150	－	8.0	8.0	400	
	522-10SP	4974007801167	－	10.0	8.0	400	
販売名：デュープルドレーンSP 医療機器認証番号：306ADBZX00011000 保険医療材料請求区分：吸引留置カテ・フィルム・チューブⅡ							
シラスコン®ペンローズドレーンSP	501-4SP	4974007801006	－	4.0	－	300	10本／箱
	501-6SP	4974007801013	－	6.0	－	300	
	501-8SP	4974007801020	－	8.0	－	300	
	501-10SP	4974007801037	－	10.0	－	300	
	501-12SP	4974007801044	－	12.0	－	300	
販売名：ペンローズドレーンSP 医療機器認証番号：306ADBZX00013000 保険医療材料請求区分：吸引留置カテ・フィルム・チューブⅠ							
シラスコン®閉鎖式外科ドレーンセット (デュープルドレーンタイプ)	526-6FSP	4547319600751	3.2	6.0	8.0	400	5セット／箱
	526-8FSP	4547319600768	5.2	8.0	8.0	400	
	526-10FSP	4547319600775	6.6	10.0	8.0	400	
シラスコン®閉鎖式外科ドレーンセット (デュープルソフトタイプ)	527-6FSP	4547319600782	－	6.0	8.0	400	
	527-8FSP	4547319600799	－	8.0	8.0	400	
	527-10FSP	4547319600805	－	10.0	8.0	400	
販売名：閉鎖式外科ドレーンセット 医療機器認証番号：305AABZX00068000 保険医療材料請求区分：吸引留置カテ・フィルム・チューブⅡ							

「SILASCON」および「シラスコン」は(株)カネカの登録商標です。



使用上の注意：必ず電子添文をご覧の上、ご使用ください。

※製品の仕様については、予告なしに変更することがあります。

販売元

株式会社 カネカ メディックス

<https://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

TEL.050-3181-4060